

# Solus



**Stannah**  
The Stairlift People

**Stannah est une entreprise familiale britannique qui fabrique des produits pionniers depuis 1860. Nous sommes le premier fabricant mondial de monte-escaliers avec une réputation inégalée de qualité, d'intégrité et de service. Nous maintenons cette réputation en appliquant des normes reconnues à chaque produit que nous fabriquons.**

## **Solus**

**Le Solus est à la tête de la prochaine génération de monte-escaliers. Développé main dans la main avec Seymour Powell, l'une des principales agences de design de produits en Europe, il allie un design contemporain aux valeurs défendues par Stannah : confort, fiabilité et sécurité.**

### **la chaise**

La chaise de conception ergonomique peut être recouverte de tissus tissés ou de cuir souple, qui se déclinent dans une gamme de teintes attrayantes pour que la chaise se fonde dans votre maison.

Le Solus fonctionne avec une commande unique facile à utiliser que vous déplacez simplement vers la gauche ou vers la droite, selon que vous voulez monter ou descendre les escaliers. Il dispose d'une gamme de capteurs intégrés qui empêchent le monte-escalier de bouger jusqu'à ce que vous soyez bien assis dans le fauteuil et qui arrêtent automatiquement le monte-escalier en cas d'obstruction dans les escaliers.


Plier la chaise ne pourrait pas non plus être plus facile, car toute la chaise se replie en une seule action. Une fois le monte-escalier arrêté, il suffit de lever les bras du fauteuil et le siège et le repose-pieds se replient simultanément.

### **Rails droits**

Dans les escaliers droits, le Solus se déplace le long d'un rail solide avec une conception mince et est monté sur les escaliers, pas sur le mur, de sorte que l'installation est rapide et propre. Les rails droits sont disponibles en argent ou en bronze.



Rail droit disponible en argent ou en bronze

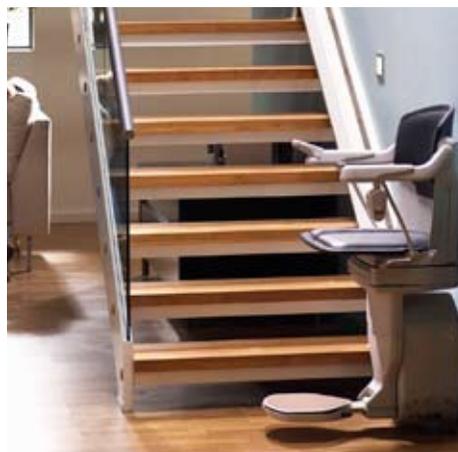

Rail droit

### **Rails courbes**

Sur les escaliers incurvés, le Solus longe des rails jumeaux minces qui sont conçus sur mesure avec précision pour assurer le meilleur ajustement possible à vos escaliers. Les rails incurvés sont disponibles dans une couleur perle qui se marie facilement avec n'importe quel décor. Le rail est toujours monté sur l'escalier, pas sur le mur et dans la plupart des cas, il peut être monté de chaque côté de l'escalier.



Rail courbé

### **Le service**

Nous sommes fiers de la fiabilité de nos monte-escaliers. Pour vous offrir une tranquillité d'esprit absolue, ils sont tous accompagnés d'une garantie complète, d'un premier service gratuit et de l'assistance de nos équipes nationales d'ingénieurs basés localement, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an pour répondre rapidement. dans le cas improbable où vous auriez besoin d'aide.



1. Déplier un Solus est exceptionnellement facile, avec une simple action de pliage en une seule étape. Abaissez simplement le bras de la chaise et le siège et le repose-pieds se déploient avec.



2. Une fois déplié, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous asseoir car notre capteur de charge du siège garantit qu'il ne bougera pas tant que vous n'êtes pas en sécurité dans le fauteuil.



3. Une légère pression sur la commande facile à utiliser permet à votre monte-escalier de monter ou de descendre les escaliers en douceur.



4. Arrivé en haut de l'escalier, vous pouvez faire pivoter le fauteuil face au palier pour descendre en toute sécurité.



5. Vous pouvez laisser le monte-escalier dans sa position pivotée en haut de l'escalier comme barrière de sécurité efficace ou le rabattre contre le mur.



6. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le monte-escalier peut être plié à plat contre le mur afin qu'il prenne moins de place dans votre maison et laisse les escaliers dégagés pour les autres utilisateurs.

### Matériau de rembourrage

peut être choisi parmi des tissus tissés doux ou un cuir luxueux, disponible dans différentes nuances.



### Commande unique facile à utiliser

nécessite simplement que votre main se déplace vers la gauche ou vers la droite, selon la direction dans laquelle vous voulez aller, il est donc facile à utiliser même pour ceux qui ont des doigts moins capables. La commande peut être positionnée sur l'un ou l'autre des bras et intègre une clé pour l'immobiliser, idéale si des enfants sont présents.



### Bras réglables

Cela signifie que votre monte-escalier est adapté à vos besoins, avec des commandes de fauteuil réglées dans une position confortable.



### Barres de liaison amovibles

faciliter le transfert en fauteuil roulant, si nécessaire.

### Leviers pivotants manuels

fait pivoter manuellement la chaise pour faire face au palier et verrouille la chaise pour éviter qu'elle ne pivote accidentellement.

### Capteur de charge de siège unique

garantit que votre monte-escalier ne bougera pas tant que vous n'êtes pas assis en toute sécurité.

### Hauteur d'assise réglable

maximise votre confort et vous aide à monter et descendre de la chaise. (Disponible uniquement sur rail droit.)

**Télécommande** vous permet d'appeler le monte-escalier ou de l'envoyer à quelqu'un en bas de l'escalier.



### Chaise ergonomique

avec un dossier de soutien et un siège large et moelleux.



### Pliage unique en une étape

signifie qu'il n'est pas nécessaire de se baisser pour replier votre monte-escalier. Soulevez simplement l'accoudoir et le siège et le repose-pieds se replie avec lui. C'est facile à faire et une considération de sécurité importante, en particulier en haut des escaliers.



### Ceinture de sécurité facile à utiliser

peut être attaché d'une main pour vous fixer dans la chaise.



### Siège pivotant

vous permet de descendre dans la position la plus sûre et la plus pratique en haut des escaliers.

### Pivot motorisé bidirectionnel en option

vous permet de descendre du siège dans la position la plus pratique en haut et en bas des escaliers. Un pivot unidirectionnel manuel qui fonctionne en haut de l'escalier est installé en standard.



### Bords de sécurité

assurez-vous que le monte-escalier s'arrête doucement mais immédiatement s'il rencontre un obstacle dans les escaliers.



• Modèle incurvé en vedette.

Coordonnées de Stannah :  
Monte-escaliers Stannah  
Watt Fermer  
Portail Est  
Et plus  
Hampshire  
SP10 3SD

Tél : 0800 715358  
Télécopie : 01264 338043

[www.stannahstairlifts.co.uk](http://www.stannahstairlifts.co.uk)

Notre politique d'entreprise est celle de l'amélioration continue des produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier les spécifications du produit et de modifier et d'améliorer la conception à tout moment. Des instructions d'utilisation complètes sont fournies pour tous les produits. Stannah est une marque déposée. Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives européennes applicables relatives à la santé, la sécurité, l'environnement et la protection des consommateurs. Pour la conception, la fabrication et l'installation, Stannah Stairlifts Limited a été le premier fabricant de monte-escaliers à obtenir une qualification complète selon la norme britannique BS5776 (1996). Un exemple de ce produit a été testé et approuvé de manière indépendante.

• Modèle droit présenté sur la couverture avant

